

holydeSTECH

TECNOLOGIE PER L'ESTETICA

ALLTECH

IL FUTURO DELL'ESTETICA



ALLTECH

IL FUTURO DELL'ESTETICA

Sei pronto a rivoluzionare il tuo approccio all'estetica?

Presentiamo con entusiasmo ALLTECH, la piattaforma all'avanguardia progettata per adattarsi alle esigenze mutevoli del mondo estetico.

✓ *Versatilità Senza Limiti*

ALLTECH si distingue per la sua versatilità, offrendo una gamma senza precedenti di trattamenti per viso e corpo. La sua capacità di adattarsi alle tendenze di mercato e l'opzione di inserire moduli aggiuntivi garantiscono una flessibilità che supera ogni aspettativa.

✓ *Innovazione Costante*

La dinamicità di ALLTECH non conosce limiti. Non solo rispecchia le esigenze del presente, ma si proietta nel futuro, anticipando le aspettative del mercato. La piattaforma si impegna a rimanere sempre attuale e aggiornabile, seguendo le mode e abbracciando le evoluzioni del mondo estetico.

✓ *Vantaggi Ecologici ed Economici*

ALLTECH non è solo un'innovazione tecnologica, ma anche un amico dell'ambiente. Riduce la quantità di rifiuti prodotti e l'energia necessaria per i trattamenti, contribuendo a un impatto positivo sulla sostenibilità.



VACUUM CORPO ASP



Tecnologia che si distingue da tutte le altre tecnologie sul mercato, per il fatto che il compressore è montato direttamente nel manipoles offrendo svariati vantaggi di utilizzo, perdite di vuoto pari a 0, potenza aspirante alta, silenziosità eccellente, rumore quasi inesistente ed infine il manipoles si collega all'apparato tramite un filo elettrico e non un tubo per il passaggio dell'aria. Nel manipoles è presente anche un filtro per le eventuali impurità aspirate. Può essere smontato e pulito al termine di ogni trattamento, immergendolo in acqua, durante il trattamento può essere usato qualsiasi tipo di prodotto.

4 IN 1 MULTIFUNZIONE



IL MANIPOLES MULTIFUNZIONE 4 IN 1, ha una sinergia di correnti che possono lavorare all'unisono, oppure scisse. ULTRASUONO 1 MHz CON EFFETTO CAVITAZIONALE TESTINA PICCOLA 44mm: Sono delle onde meccaniche sonore, vibrazioni acustiche realizzate mediante l'effetto piezoelettrico, tramite un cristallo di Quarzo, esse si diffondono sotto forma di onde con compressione-decompressione e un movimento push-pull. Il contatto dell'energia ultrasonica con i tessuti produce effetti termici e meccanici.

RADIOFREQUENZA BIPOLARE RADIALE CORPO: È una tecnica sviluppata e ottimizzata tra le più efficaci nell'estetica professionale, basata sulla trasmissione di calore endogeno mediante l'emissione di onde radio che stimolano i fibroblasti alla produzione di proteine, collagene ed elastina, migliorando il microcircolo con conseguente riduzione della ritenzione idrica.

AZIONE AUTO DRENANTE: Stimola la circolazione linfatica e favorisce: l'innalzamento delle difese immunitarie, aiuta a liberarsi da scorie e tossine, è ottimo per combattere lo stress, favorisce il rilassamento muscolare.

LUCE VERDE 500 nm: Il colore verde è associato a lunghezze d'onda vicine ai 500 nm. Le lunghezze d'onda nel range di 500 nm sono utilizzate in alcune terapie con la luce, come la fototerapia. La fototerapia può essere utilizzata per trattare diverse condizioni della pelle, tra cui la psoriasi, l'eczema e la vitiligine, stimola la produzione di collagene ed elastina, quindi stimola la tonificazione del tessuto e ripristina gli stati infiammatori.


ONDA ACUSTICA DINAMICA

Le Onde Acustiche Dinamiche sono impulsi sonori (energia acustica) di natura meccanica in grado di propagarsi nei tessuti, in sequenza rapida e ripetuta irradiandosi sulla zona trattata. La loro azione stimola una risposta fisiologica che accelera i naturali processi di riparazione dei tessuti. Permettono la riduzione delle cellule adipose e il ricompattamento del tessuto connettivo.

Inoltre incrementa la microcircolazione veno-linfatica, stimola i fattori di crescita, aumenta la produzione di collagene ed elastina migliorando il tono della pelle in termini di elasticità e compattezza. Le Onde non sono invasive, agiscono in maniera naturale, permettendo di lavorare in totale sicurezza sulla causa dell'ineestetismo e ripristinare le condizioni ottimali nelle zone che sono state "colpite" dall'ineestetismo stesso, con effetti visibili già dalla prima seduta e che migliorano nelle ore e nei giorni successivi.

LIPOLASER 8 PLACCHE

Il Lipolaser è la nuova tecnica per la riduzione del grasso, il modellamento del corpo e la cellulite, obesità localizzata pre e post liposuzione, retrazione dei tessuti dopo la gravidanza. Si basa sulla cessione dell'energia dei raggi infrarossi ad alta intensità, anche conosciuto come IR in modo sicuro e indolore sfrutta l'energia della luce, per penetrare la pelle in modo sicuro. Il Lipolaser di AllTech raggiunge il tessuto sottocutaneo dalle adiposità senza danneggiare i tessuti circostanti, è in grado di stimolare le cellule adipose e liberare gran parte del loro contenuto cellulare (acqua, acidi grassi e glicerolo) allo spazio interstiziale che viene successivamente drenato e naturalmente metabolizzato dal corpo. Il tutto si traduce in perdita di centimetri.

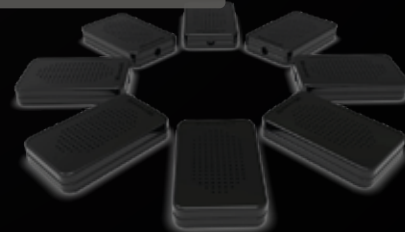



HYDRO PEN E RF VISO

E' una tecnica sviluppata e ottimizzata tra le più efficaci nell'estetica professionale, basata sulla trasmissione di calore endogeno mediante l'emissione di onde radio che stimolano i fibroblasti alla produzione di proteine, collagene ed elastina, migliorando il microcircolo con conseguente riduzione della ritenzione idrica. Durante il trattamento verrà percepito un calore gradevole sulla zona interessata che tenderà a rimanere anche dopo la seduta stessa per alcuni minuti, questo fenomeno è dipeso dal fatto che il calore generato è di tipo endogeno e quindi proveniente dall'interno del nostro tessuto e smaltito verso l'esterno. Con la Radiofrequenza si possono ottenere risultati efficaci e duraturi senza ricorrere ad interventi chirurgici invasivi.

MIOLIFTING 4 IN 1

MIOLIFTING BIO-STIMOLAZIONE + TECNOLOGIA LASER LLLT A DIODO + RADIO FREQUENZA + LUCE VERDE



I trattamenti di miolifting consistono in una tecnica indolore di bio-stimolazione eseguiti tramite l'ausilio di una stimolazione elettrica di media/alta frequenza con impulsi frazionati, stimolando il viso e il collo, ripristinando le strutture muscolari e i vasi sanguigni, alleviando e annullando imperfezioni cutanee. Il trattamento consiste nello stimolare e modificare il tessuto fasciale esistente sotto la pelle, ripristinandone la posizione originale, fatto assolutamente possibile poiché il muscolo è l'unico organo che può recuperare in poco tempo la sua struttura originaria fino a tarda età. Per completare e potenziare l'efficacia del trattamento si aggiunge la Fotostimolazione infrarossa che tramite 2 diodi Laser con tecnologia LLLT da 200mW e lunghezza d'onda ampia stimolano naturalmente la parte interessata (biostimolazione) alla produzione di collagene, insieme alla radio frequenza che stimola i fibroblasti alla produzione di collagene ed elastina e il diodo Il colore verde è associato a lunghezze d'onda vicine ai 500 nm. Le lunghezze d'onda nel range di 500 nm sono utilizzate in alcune terapie con la luce, come la fototerapia. La fototerapia può essere utilizzata per trattare diverse condizioni della pelle, tra cui la psoriasi, l'eczema e la vitiligine. Alcuni trattamenti di bellezza e procedure anti-invecchiamento possono coinvolgere l'uso di luci a diverse lunghezze d'onda. Questi trattamenti mirano a stimolare la produzione di collagene ed elastina nella pelle, migliorando così l'aspetto generale e la tonicità della pelle. La forza di questo dispositivo è l'unione e la sinergia tra i 4 elementi che la compongono, UN VERO E PROPRIO LIFTING NON CHIRURGICO.

VACUUM VISO ASP



Tecnologia che si distingue da tutte le altre tecnologie sul mercato di aspirazione endotermica e Vacuum, per il fatto che il compressore è montato direttamente nel manipoło offrendo svariati vantaggi di utilizzo, perdite di vuoto pari a 0, potenza aspirante alta, silenziosità eccellente rumore quasi inesistente ed infine il manipoło si collega all'apparato tramite un filo elettrico e non un tubo per il passaggio dell'aria. L'aspirazione è molto potente al massimo della potenza perché non essendoci tubi e compressori a distanza ma tutto ravvicinato non ci sono perdite di vuoto e risulta essere molto silenzioso. Può essere smontato e pulito al termine di ogni trattamento, immergendolo in acqua, durante il trattamento può essere usato qualsiasi tipo di prodotto.

RENEWSKIN



Tramite l'uso di Micro-correnti controllate e modulate con sistema elettronico PWM (Power Width Modulation). Renewskin con l'uso delle Micro-correnti rigenera ed esfolia lo strato corneo, stimola i fibroblasti alla produzione di proteine fondamentali per il tessuto, induce la pelle ad una totale rigenerazione.

SCHEDA TECNICA

- Y Modello Apparecchiatura: **ALLTECH** Piattaforma Multifunzione: Viso e Corpo
- Y Classificazione: Apparecchiatura per uso estetico.
- Y Classe di Sicurezza: 2 tipo BF.
- Y Marchiatura: **CE** normativa C.E.I. 89.336-62-39-EN60601-2-5.
- Y MCU: General Purpose (uso generico) con architettura MIPS.
- Y Memoria HD: micro-SDHC da 4GByte Fat 16
- Y Video: Display TFT LED 9 pollici Ris. 800x480 TFT 24bit Touch Screen.
- Y Audio: Assente
- Y Trasmettitore / Ricevitore: Porta Infrarossa bidirezionale con codifica 26KHz
- Y Alimentazione generale: 220Vac 50-60Hz.
- Y Protezione Esterna: 2 Fusibili da 2 Ampere 220V dimensione 5x20mm
- Y Protezione interna: 1 Fusibile da 3.15 Ampere 220V dimensione 5x20mm
- Y Potenza o Assorbimento Totale: 100Watt(circa).
- Y Caratteristiche emittitori: emissione da 1000KHz (+10%) (1,5Wcm² Ultrasuoni) (25Watt-50Watt Radiofrequenza) (5Watt micro-stimolazione Hydrofores) Tecnologia Laser LLLT, IR 800nm-940nm.
- Y Emissione: Pulsata con regolazione PWM.
- Y Pressione Atmosferica di esercizio: 0.5-1600mb.
- Y Umidità relativa di esercizio: da 30% a 55%.
- Y Temperatura di esercizio: da 10 a 35 Gradi Centigradi.
- Y Dimensioni e peso apparecchiatura: 32,5cm (L) x 30cm (P) 28,5cm (H) 6,5kg (circa).
- Y Dimensioni e peso carrello: 38cm (L) 37,5cm (P) 96,5cm (H) 7,8kg (circa).
- Y Destinazione d'uso: Trattamenti per uso estetico.

Schede di riferimento normativo al Decreto 15 Ottobre, n. 206
 Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n.110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 Gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetica.

Schede numero: scheda 2A(A2), scheda 6, scheda 13, scheda 2B, scheda 15.

Caratteristiche Tecniche	
Modello: ALLTECH	
Alimentazione: 220AC 50/60Hz	
Assorbimento: 100W	
Normativa C.E.I. 89/336-7/23-6/29	
Aggiornata al D.L. 206 del 19/10/2011	
CE	
Prodotto: XXXXX/20XX	
Matricola: 00XXXX	
apparatto certificato per uso estetico.	

Etichetta che identifica il Modello, la matricola e la data di produzione dell'apparato
 NB: Assicurarsi che sia ben leggibile nel corso degli anni in caso contrario contattare il centro assistenza.



ALLTECH

IL FUTURO DELL'ESTETICA



Holydest 2000 s.a.s. di Riccardo Di Fiore

Via C. Camilliani, 41-47 | 90145 Palermo | P.I. 06476400822

Tel. 091.6406089 - Cell. 392.5600213 (Servizio Whatsapp)

Web Site: www.holydestech.it | E-mail: info@holydest2000.it